

### Specs in brief - Specifiche in breve

	Neoo S9	Neoo R9	Neoo S12	Neoo R12
Power (kW)	3,5	3,5/5	3,5	3,5/5
kV Range (kV)	40-110	40-120	40-110	40-120
mAs Range (mAs)	1-250	1-250	1-250	1-250
SID (mm)	1000	960	1000	960
Free Space (mm)	730	690	730	690

### Dicom Options - Opzioni Dicom <sup>(1)</sup>

- DSA Digital Subtraction Angiography
- QA Quantitative Angiography
- Worklist
- Storage
- Print
- CD DVD Saving
- MPPS
- ST Commitment
- Query Retrieve

(1) Available only with RTP - Disponibili solo con RTP



### Monitor

Available with two 19 inches medical grade monitor. Up/down movement, rotate and tilting.

### Monitor

Disponibili con due monitor da 19 pollici di grado medicale. Movimento verticale, rotazione e tilting.

Doc. 2873



The 'C' arm of the Neoo series, easy to move, position and use, is used specifically in operating theaters on orthopedic, traumatological, urological and vascular procedures.


*L'arco a 'C' della serie Neoo, facile da spostare, posizionare e utilizzare, e' utilizzato specificamente nelle sale operatorie su procedure ortopediche, traumatologiche, urologiche e vascolari.*

Available with 625 lines or 1kx1k cameras. For vascular procedures is used the Real Time Processing (RTP) system, which allows the integration of various useful options for this kind of exams such as DSA (Digital Subtraction Angiography) or image subtraction function or the QA (Quantitative Angiography) function useful for stenosis measurement.


*Disponibile con camere da 625 linee oppure da 1kx1k. In uso vascolare viene utilizzato il sistema di Real Time Processing (RTP) che permette di integrare diverse opzioni utili ai fini vascolari come ad esempio la funzione DSA (Digital Subtraction Angiography) o sottrazione d'immagine oppure la funzione QA (Quantitative Angiography) utile per la misurazione delle stenosi.*



digital subtraction angiography

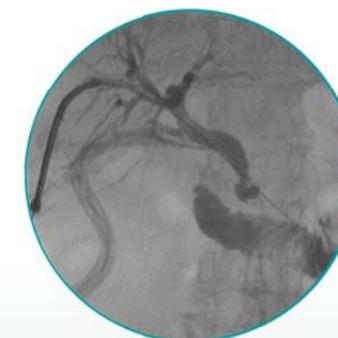

aortiliac endovascular surgery

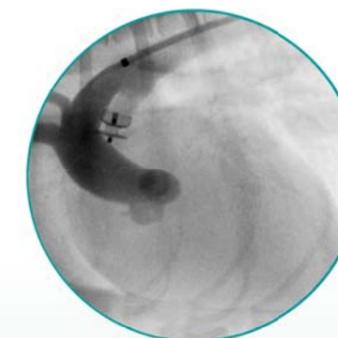

stent placement




foot fracture consolidation



ankle prosthesis check



tibial plate consolidation

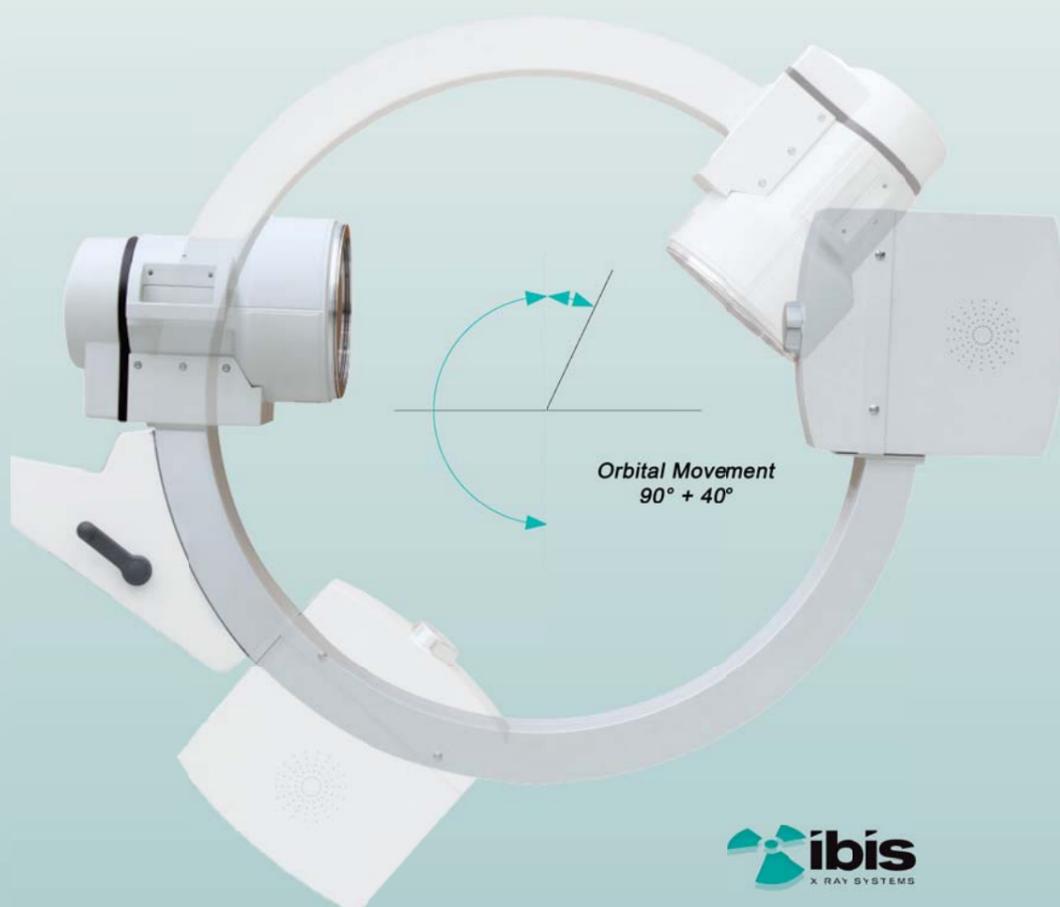

IBIS S.r.l. reserves the right to change specifications and / or features at any time and without prior notice.  
IBIS S.r.l. si riserva il diritto di modificare le specifiche e/o le caratteristiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

